


使い捨て駆血帯

院内感染のリスクを軽減、柔らかい素材で安心

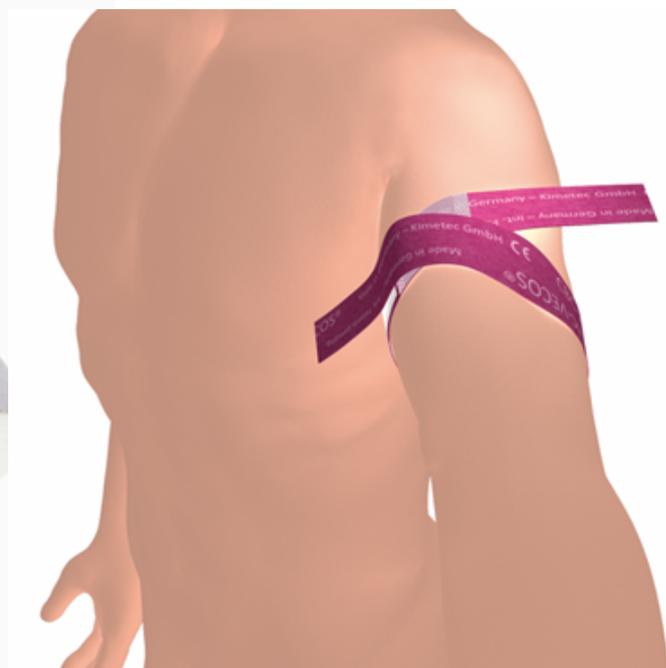

鮮やかな彩りで医療を明るく
安全でやさしい駆血帯

特長

☆ 衛生的

- 単回使用で細菌の伝播を防ぎ、交差汚染のリスクを軽減
- 医療スタッフの衛生基準を満たし、かつ時間のかかる消毒は不要

☆ やさしい

- 皮膚表面のねじり、圧迫がない
- 患者にとって心地よい感触

☆ 簡単

- マジックテープ仕様のため、簡単に圧迫・取り外しが可能
- 伸縮性があるため、簡単に圧の調整が可能


☆ 安全

- ラテックスフリー、シリコンフリー、DEHP(フタル酸エステル)フリー
- 熱と湿気への耐久性が強い

製品リスト

製品コード	JANコード	製品名/サイズ	入数
BIC-521001V125	4582645180294	ビーアイシー使い捨て駆血帯/幅 3cm x 長さ 50cm	1箱(125個入り)
BIC-521002V100	4582645180300	ビーアイシー使い捨て駆血帯/幅 3.5cm x 長さ 65cm	1箱(100個入り)

使用説明及び構造

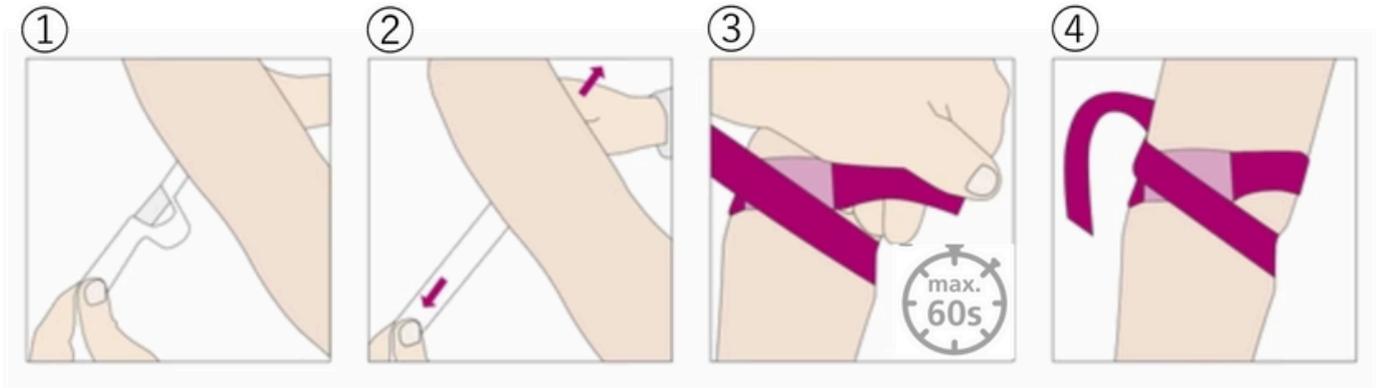


①
ストラップの印刷されていない面を患者の腕に当てます。

②
駆血力を強めるため完全に伸ばしてください。

③
しっかりと腕に巻いてマジックテープ面で固定します。
(60秒以内に解除してください)

④
ストラップを引っ張って解除してください。

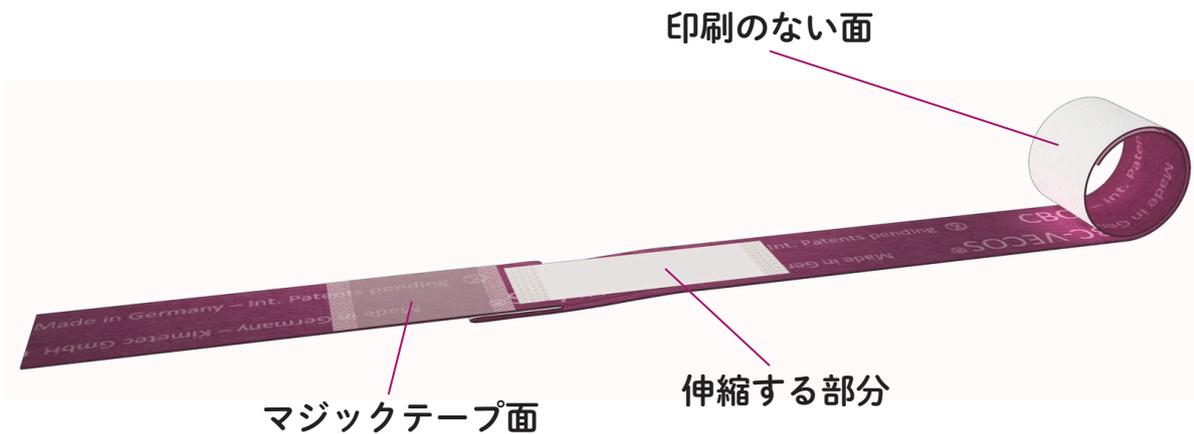

交差感染を防ぐために使用後は、廃棄規定に従って廃棄してください。
製品についてお気づきの点やご質問がございましたら、弊社までお問い合わせください。

【製造販売元・問い合わせ先】

ビーアイシーグループ株式会社 **BICMEDICAL**

ビーアイシーメディカル事業部

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4-1 新国際ビル

TEL : 03-6269-9120 FAX : 03-6269-9118

E: contact@bicmedical.com HP: bicmedical.com

【製造元】

Kimetec GmbH (ドイツ)

brighten your care

colorful medical supplies for happier hospital!

Be part of our